

# Our Imaging Center Offers an Added Layer of Protection During Your Mammogram




Bella Blankets® protective coverlets will be used to provide you with an **extra** level of care

*Bella Blankets*®  
Protective Coverlets for Mammography

Our imaging center uses Bella Blankets<sup>®</sup> protective coverlets to provide you the best in patient care

### What are Bella Blankets?

Bella Blankets are protective coverlets that attach to the mammography equipment.

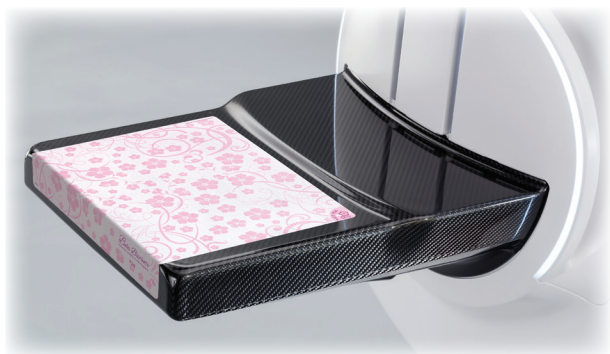

### Are Bella Blankets sanitary?

Although the technologists sanitize the equipment between patient appointments, Bella Blankets are an added level of protection and help to act as an **additional sanitary barrier**. They are used for your exam only and then discarded afterwards.

## How will Bella Blankets feel during my mammogram?

It will feel less cold to the touch because Bella Blankets remove the chill from the equipment.

## What clinical impact does Bella Blankets offer?

Our top priority is to get the best image possible. Bella Blankets have a unique material that helps hold the breast in place, especially if you are perspiring. Bella Blankets may help the technologist get **more breast tissue**<sup>1</sup> on your image for the radiologist to review.

## Why are Bella Blankets so thin?

Bella Blankets are thin by design and may help the technologist get **more breast tissue**<sup>1</sup> because of the thin physical barrier between you and the equipment.

## Are Bella Blankets suitable for sensitive skin?

Bella Blankets are hypoallergenic and are not made with natural rubber latex.

## What else can Bella Blankets do to make my experience more pleasant?

Some women have cuts under their breast or infections and it may be painful. Bella Blankets can help decrease the discomfort of cuts which could be felt during your mammogram.

---

<sup>1</sup> Wagner, S. and A Merkulov, MD. 2013. "Comparison Study: Impact of Thin Protective Coverlets on Positioning and Tissue Acquisition in Breast Imaging."

## **Why Bella Blankets?**

Your experience is important to us! We want to make your mammogram as pleasant as possible and provide you with the peace of mind that we take your breast health seriously.

## **Will Bella Blankets cost me extra money?**

No! Bella Blankets are an added level of service at no additional charge!

## **Are Bella Blankets safe?**

Yes, the FDA (U.S. Food & Drug Administration) cleared Bella Blankets in March 2008.

---

*We care about your health*

*We care about your well-being*

*We care about you*


---

***We know you have  
choices, thank you for  
selecting us for your  
mammogram today!***


## Your Breast Health is Important to Us!

This is a reminder to perform a regular Breast Self-Exam.

According to the American Breast Cancer Foundation (ABCF), there are 3 recommended ways to perform a self-breast exam:

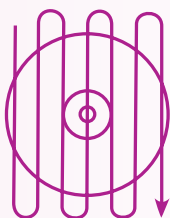

vertical

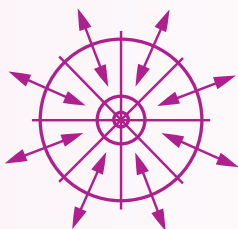

wedge





circular

If you choose to do a breast self-exam (BSE), you should have your technique reviewed by a medical professional.


Visit [abcf.org](http://abcf.org) for more information.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Non-Sterile 
- Single Patient Use Only; Do Not Reuse 
- Smooth out any air bubbles or wrinkles that may occur as they may show on the image

See package insert for Instructions for Use and other safety related information or visit [beekley.com/ifu](http://beekley.com/ifu)

Bella Blankets are hypoallergenic and are not made with natural rubber latex.

 Manufactured by Beekley Corporation  
One Prestige Lane, Bristol, CT 06010 USA  
Tel: 1.800.233.5539 or +1.860.583.4700  
Fax: 1.800.735.1234 [beekley.com](http://beekley.com)

BEEKLEY, BEEKLEY MEDICAL, BELLA BLANKETS, and WHEN YOUR DIAGNOSIS MUST BE RIGHT are Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. BEEKLEY is a Registered Community Trademark. BEEKLEY is a registered trademark in Canada. PIK-UP is an unregistered trademark of Beekley Corporation.

© 2021 Beekley Corporation. All rights reserved.

**Beekley  
Medical**<sup>®</sup>  
when your diagnosis  
must be right<sup>®</sup>



**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



REV: BEL\_BR\_PA\_0121

Nuestro Centro de  
Obtención de Imágenes  
Ofrece una Capa Adicional  
de Protección durante  
su Mamografía




Los cobertores protectores  
Bella Blankets® se usarán para  
suministrarle un **mejor** nivel  
de atención

*Bella Blankets®*  
Cubiertas Protectoras para Mamografías

En nuestro centro de obtención de imágenes Bella Blankets® utilizamos cobertores protectores para brindarle la mejor atención hospitalaria

### ¿Qué son los cobertores Bella Blankets?

Bella Blankets son cobertores protectores que se aplican al equipo de mamografía.

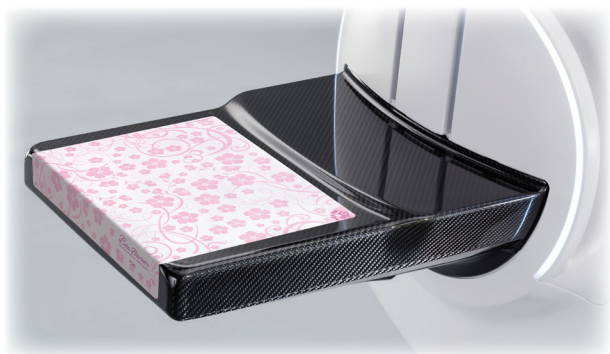

### ¿Los cobertores Bella Blankets son higiénicos?

Si bien los técnicos higienizan el equipo entre las citas de los pacientes, los cobertores Bella Blankets ofrecen un mejor nivel de protección y ayudan al actuar como una **barrera sanitaria adicional**. Se utilizan para su examen exclusivamente y luego se desechan.



## ¿Cómo se sentirán los cobertores Bella Blankets durante mi mamografía?

Se sentirá menos fría al tacto porque los cobertores Bella Blankets eliminan el frío que produce el equipo.

## ¿Qué efecto clínico ofrecen los cobertores Bella Blankets?

Nuestra máxima prioridad es obtener la mejor imagen posible. Los cobertores Bella Blankets tienen un material único que ayuda a mantener la mama en el lugar, especialmente si usted está transpirando. Los cobertores Bella Blankets pueden ayudarle al técnico a captar **más tejido mamario**<sup>1</sup> en su imagen para que analice el radiólogo.

## ¿Por qué los cobertores Bella Blankets son tan delgados?

Los cobertores Bella Blankets están diseñados para ser delgados y pueden ayudarle al técnico a captar **más tejido mamario**<sup>1</sup> debido a la delgada barrera física entre usted y el equipo.

## ¿Los cobertores Bella Blankets son adecuados para piel sensible?

Los cobertores Bella Blankets son hipoalergénicos y no están hechos con látex de caucho natural.

## ¿Qué más pueden hacer los cobertores BellaBlankets para hacer que mi experiencia sea más placentera?

Algunas mujeres tienen cortes debajo de sus mamas o infecciones y puede resultar doloroso. Los cobertores Bella Blankets pueden ayudar a reducir la molestia en los cortes que podría sentir durante su mamografía.

---

<sup>1</sup> Wagner, S. y A Merkulov, MD. 2013. "Estudio comparativo: Efecto de los Cobertores Protectores Delgados en el Posicionamiento y la Captación de Tejidos durante la Obtención de Imágenes Mamarias".

## ¿Por qué los cobertores Bella Blankets?

¡Su experiencia es importante para nosotros! Queremos hacer que su mamografía sea lo más placentera posible y brindarle la tranquilidad de que atendemos con seriedad la salud de sus mamas.

## ¿Tendré que abonar un costo adicional por los cobertores Bella Blankets?

¡No! Los cobertores Bella Blankets ofrecen un mejor nivel de servicio, ¡sin un cargo adicional!

## ¿Los cobertores Bella Blankets son seguros?

Sí, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) aprobó los cobertores Bella Blankets en marzo de 2008.

---

*Atendemos su salud*

*Atendemos su bienestar*

*Le atendemos a usted*


---

*Sabemos que dispone de  
opciones, ¡gracias por  
elegirnos hoy para su  
mamografía!*


## ¡La salud de sus mamas es importante para nosotros!

Este es un recordatorio de que debe realizarse un autoexamen de mamas habitualmente.

De acuerdo con la Fundación Estadounidense del Cáncer de Mama (American Breast Cancer Foundation, ABCF), se recomiendan 3 maneras de realizarse el autoexamen de mamas:

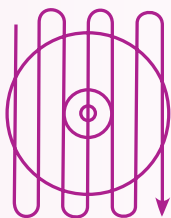

vertical

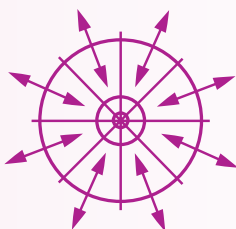

cuña





circular

Si elige hacerse un autoexamen de mamas (breast self-exam, BSE), debería hacer que un profesional médico revisara la técnica que usted emplea.


Visite [abcf.org](http://abcf.org) para obtener más información.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- No estéril 
- Uso exclusivo para un solo paciente; No volver a utilizar 
- Elimine las burbujas de aire o las arrugas que puedan formarse ya que pueden aparecer en la imagen

Consulte el prospecto para ver las Instrucciones de Uso y otra información sobre seguridad o visite [beekley.com/ifu](http://beekley.com/ifu)

Los cobertores Bella Blankets son hipoalergénicos y no están hechos de látex de caucho natural.

 Elaborado por Beekley Corporation  
One Prestige Lane, Bristol, CT 06010 USA  
Tel: 1.800.233.5539 o +1.860.583.4700  
Fax: 1.800.735.1234 [beekley.com](http://beekley.com)

BEEKLEY, BEEKLEY MEDICAL, BELLA BLANKETS y WHEN YOUR DIAGNOSIS MUST BE RIGHT son pat. y marc. com. regs. de EE. UU. BEEKLEY es una marca comercial colectiva registrada. BEEKLEY es una marca comercial registrada en Canadá. PIK-UP es una marca comercial no registrada de Beekley Corporation.

© 2021 Beekley Corporation. Todos los derechos reservados.

**Beekley  
Medical**<sup>®</sup>  
when your diagnosis  
must be right<sup>®</sup>



**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



REV: BEL\_BR\_PA\_0121